

# EQUIA Forte с един поглед

- Системата не изисква наслявяване, не е леплива и кондензируема и се адаптира много добре към стените на кавитета
- С почти никакъв полимеризационен стрес, EQUIA Forte може да бъде наречена истински едноетапен материал дори за дълбоки кавитети
- Употребата на кофердам е по избор и химичната адхезия елиминира необходимостта от сложни адхезивни процедури
- Без необходимост от сложно финиране и полиране, тъй като е достатъчно само еднократно нанасяне на EQUIA Forte Coat
- Брилянтен **блясък** и гладка повърхност с траен, естествен блясък, по-лесно от когато и да било
- Общо време за процедурата около 3,5 минути\*
- Повишена здравина на глас-иономера във времето, благодарение на уникалния матуриращ ефект, дължащ се на слюнката
- Разширени индикации за употреба в сравнение с EQUIA



**EQUIA**  
FORTE

Системата EQUIA Forte се предлага в различни единични и комбинирани опаковки, съдържащи EQUIA Forte Fil и бутилка EQUIA Forte Coat. EQUIA Forte Fil е налична в следните Vita® цветове: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3 и C4.

\*Времето за работа се основава на опита на специалиста



**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B - 3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GC EEO - Bulgaria  
BG - София 1202  
ул. "Будалпеца" 92, ап. 4-3  
Тел. +359.2.983.30.30  
Факс. +359.2.858.31.37  
bulgaria@eoo.gceurope.com  
www.eoo.gceurope.com

**'GC.'**

# EQUIA Forte от GC



Глас-хибридна  
ИНОВАЦИЯ за пациенти  
от 7 до 77  
и ОТВЪД

z OLFEN 2.101.05/15

**'GC.'**

# Доказаният подход на EQUIA заема НОВО НИВО

EQUIA Forte е следващата иновация на GC гласйонимерите и композитните технологии посредством EQUIA Forte Fil и EQUIA Forte Coat, действащи синергично. Заедно те образуват по-здрав, превъзходен едноетапно нанасящ се материал за дисталната област.

Тази уникална възстановителна система за всички възрастови групи ще ви впечатли на всички нива. Впечатляващата естетика увеличава възможностите Ви за дистални възстановявания, за да изпълните очакванията на всичките си пациенти. Основавайки се на системата EQUIA, клинично доказала се през последните години, EQUIA Forte предлага великолепна алтернатива в ежедневноста Ви практика.

## Стъклен хибрид отвътре

EQUIA Forte Fil е бързотвърдяващ естетичен възстановителен материал с подобрени физични качества, постигнати чрез въвеждането на нова Глас-Хибридна технология. Новото, ултраfino и високо реактивно стъкло е разпръснато сред стъкленойонемерни пълнители, ускорявайки и подсилвайки формирането на матрикс след смесване. Тази иновативна глас-хибридна технология повишава наличните йони и изгражда много по-силна матриксна структура с по-добри физически качества, износоустойчивост и отделяне на флуор.

## Естествена връзка

Без необходимост от кондициониране или бонд със своята универсална вградена свързваща технология и изключителна влаголюбивост. EQUIA Forte е толерантна към влагата и се свързва еднакво добре с всички повърхности, независимо от възрастта на зъбите. От млад емал до склеротичен дентин... с EQUIA Forte Вие няма нужда да промените своя подход.

Друго предимство е, че той втвърдява почти без стрес или свиване.



Prof. Aline Neves, Бразилия  
Склеротичен дентин



Dr. Raimond van Duinen, Холандия  
Млад емал




Dr. Raimond van Duinen, Холандия  
Клас V

Вродена адхезия


Благоприятен за пулпата и може да се използва при дълбоки кавитети

## Устойчивост на фрактуриране

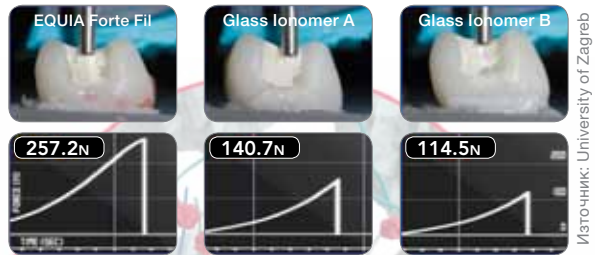

Източник: University of Zagreb

## Пълна синергия

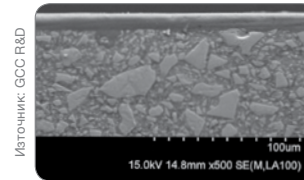

Тънко разстилане на EQUIA Forte Coat



Краен резултат

## Наистина иновативен

Действайки в синергия с модерните МИ дентални концепции, тези високо технологични материали превръщат EQUIA Forte, в наистина иновативна биомиметична, отделяща флуор възстановителна система, която е много бърза и лесна за използване. Основавайки се на гласйонемерната технология, EQUIA Forte е благоприятна за пулпата и може да се използва при дълбоки кавитети. Манипулативността е безпроблемна и независима от възрастта или мястото на възстановяването. Подгответе, нанесете едноетапно, финирайте, покрийте, фотополимеризирайте... няколко лесни стъпки за перфектни резултати.

Prof. Ivana Miletić, Хърватска



Дълбок кавитет

## Клинично доказан

EQUIA Forte се основава на впечатлителното клинично представяне на оригиналната система EQUIA и представлява реална алтернатива за възстановяванията в дисталната област. Посредством своята глас-хибридна технология, EQUIA Forte разширява препоръчителните индикации за употреба при Class II кавитетни препарации (без туберкули).



Широка кавитетна препарация



С EQUIA Forte Coat, придаващо блясък тънко покритие, транспарентността и естетиката се подобряват. Характеризиращ се с омрежен мономер и патентованата от GC технология за моно-дисперсия на нано-пълнителя, EQUIA Forte Coat придава цялост на възстановяването. EQUIA Forte Coat се нанася с четка и се фотополимеризира, за да образува силно износоустойчив, самоадхезивен слой, осигуряващ гладка, запечатана повърхност със забележителна здравина и впечатляваща издръжливост.

Подготи



Напълни



Няколко лесни стъпки за перфектни резултати

Покри



Фотополимеризирай



Резултати от Greifswald University (Германия) клинично проследяване, което показва 4 годишни възстановявания с EQUIA с ниво на фрактуриране по-малко от 3%. Друг клиничен случай, направен в Hacettepe University (Турция) показва, че системата EQUIA и съвременните микрохибридни композити имат сходно представяне след 4 години.\*  
\* Gurgan et al, Operative Dentistry, 2015, 40-1